



SCHEDA TECNICA I.20

ARMADIO DA INTERNO CON ILLUMINAZIONE A LED PER DEFIBRILLATORI AUTOMATICI DA ESTERNO

PRESENTAZIONE

L'armadio interno I.20 è composta da una scatola universale che si adatta a tutti i defibrillatori. Si compone di una copertura trasparente e personalizzabile (in base al volume ordinato) e di una barra di sostegno. È progettato per un'installazione interna con sistema di allarme e led.

Realizzato in polipropilene (materiale con trattamento antiurto, isolante, ignifugo e imputrescibile) e riciclabile al 100%.

Leggero per ridurre i costi di trasporto (limita l'impatto di carbonio).

Design innovativo e moderno.
Manifattura francese. 

GARANZIA 5 ANNI

SEGNALETICA

Sull'armadio viene fornita una posizione per incollare il foglio di monitoraggio della manutenzione.

All'interno dell'armadio, una posizione con un codice QR rimanda alle diverse schede tecniche dei diversi dispositivi.

Sulla copertina trasparente è esposto un cartello con i pittogrammi della catena della sopravvivenza.

I diversi loghi ed etichette AED DAE e il cuore sono stampati sul coperchio trasparente resistente ai raggi UV (Grifen).

4 COLORI DISPONIBILI PER IL TUO ARMADIO





SCHEMA TECNICA I.20

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Le armadi SDNS TECH sono concepiti per ricevere defibrillatori automatici esterni (DAE). Le scatole I.10 e I.20 sono progettate per essere installate all'interno.

E30 e ES.40 sono progettati per l'installazione all'esterno.

gli armadi non sostituiscono i controlli e la manutenzione obbligatori del DAE secondo i protocolli del produttore.

Attenzione, prima dell'installazione dell'armadio si prega di rimuovere la pellicola protettiva dal cofano trasparente.

GARANZIA

Gli armadi DAE SDNS TECH sono garantiti 5 anni (esclusi i componenti elettronici garantiti 2 anni) dalla data di acquisto da parte del distributore dalla società D-SECURITE GROUPE che è il distributore esclusivo.

Eventuali modifiche all'I.20 annulleranno la garanzia.

Al ricevimento degli armadi, controllare la conformità dei prodotti e, in caso di difetto o non conformità, informare immediatamente D-SECURITE GROUPE per iscritto e comunicargli tutte le informazioni che possono caratterizzare la natura del difetto riscontrato.

Sono inoltre esclusi da qualsiasi garanzia, la normale usura degli armadi, qualsiasi conseguenza di negligenza, mancanza di controllo, mancanza di mantenimento di una manovra sbagliata non imputabile a D-SECURITE GROUPE, da qualsiasi uso improprio o modificazione o riparazione effettuata senza il consenso scritto di D SECURITE GROUPE.

Nessun reclamo di alcun tipo può essere presentato oltre 15 giorni dopo la scoperta della causa del reclamo.

DESCRIZIONE TECNICA

Materiale del case : materiale PP (polipropilene)

Materiale di coperchio : PET Grifen (polietilene)

Peso dei componenti principali dell'armadio:

- Casse senza coperchio : 0,859 kg
- Coperchio senza casse : 0,224 kg
- Scheda elettronica, batterie, magneti: 0,231 kg
- Peso complessivo: 1,3 kg

Dimensioni: L 390 mm / A 467 mm / P 210 mm

La durata della batteria (LR6 x3) in dotazione è superiore a 2 anni con coperchio chiuso, in funzionamento normale.

Manifattura francese

FUNZIONAMENTO



Il mobile I.20 è dotato di illuminazione a LED.

In modalità giorno, i LED sono verdi, attivi ogni 2 secondi.



Quando il coperchio è aperto: i led lampeggiano in rosso ogni 2 secondi e suona l'allarme. L'allarme acustico viene attivato in modo intermittente ogni 32 secondi.

Quando le batterie sono scariche e il coperchio è chiuso, i led rossi lampeggiano ogni 2 secondi, con un beep ogni 20 secondi.

Parti e materiali di consumo possono essere ordinati separatamente.

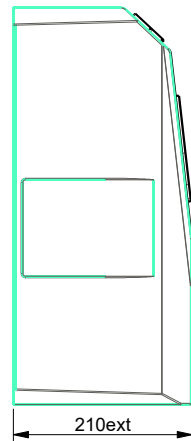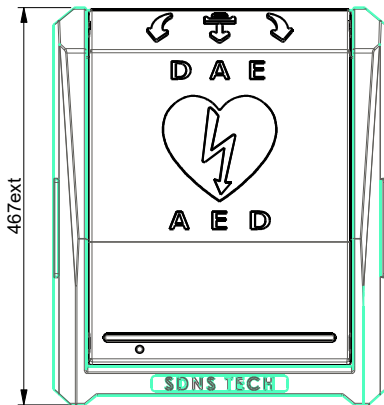

Coperchio + Casse + Barra di supporto

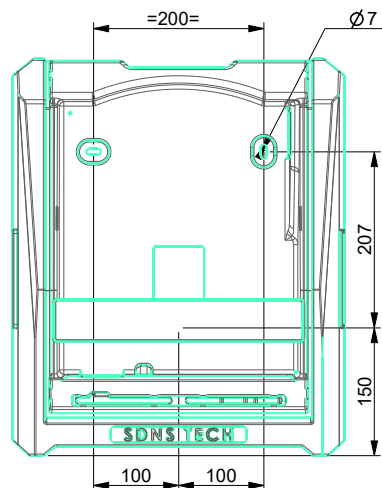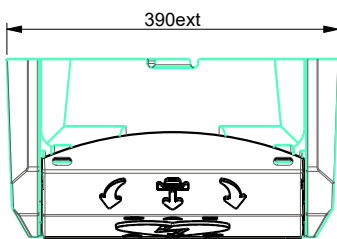

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo certificato attesta che il prodotto sottostante è conforme alle specifiche indicate ed è stato testato in conformità con i nostri obblighi in conformità con BS EN ISO 9001:2015. Conferma anche - se applicabile - che i prodotti sensibili all'elettricità statica siano stati maneggiati e imballati con cura in conformità alle normative ANSI/ESD S 20.20:2014 e BS EN 61340-5-1:2016 e alle condizioni tecniche.

In aggiunta e in equivalenza, la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.

Il blocco di alimentazione è conforme alla direttiva (2014/35/UE) – EN62368-1:2014+A11:2017
EN 55032:2015 Classe B // EN 61000-3-2:2014 // EN 61000-3-3:2013

EMS (susceptibilità elettromagnetica): EN 55024:2010+A1:2015

Informazioni sui prodotti

Modelli

I.10 / I.20 / E.30 / ES.40

Descrizione del prodotto

Armadietto per defibrillatore

Marca/Modello :
SDNS.TECH



Dichiarazione di conformità RoHS

La direttiva UE 2011/65/UE e (UE) 2015/863 limita l'uso delle 10 sostanze nella fabbricazione di alcuni tipi di apparecchiature elettriche.

Per accessori come pali esterni e staffe di montaggio, la sicurezza passiva e il metodo di prova fanno riferimento alla norma NF EN 12767.

V1 - 05/07/2023 - EL



Manifattura francese

4



www.sdns.tech | contact@sdns.tech
+33 (0)6 10 15 76 75
Distributore esclusivo : D-Sécurité Groupe

Distribuito da :

