



Un tensiomètre de bras automatique et intelligent, conçu pour une utilisation quotidienne.



Tension artérielle



Facile à utiliser



Bluetooth

APP

App

- ▶ **Cliniquement prouvé.** Développé en collaboration avec une équipe de professionnels de santé, l'appareil utilise une technologie de compression intelligente associée à un brassard en coton Lycra très extensible nouvellement conçu. Il vous permettra de prendre des mesures précises et de vivre une expérience aussi agréable que possible.
- ▶ **Facile à utiliser.** Prenez votre tension artérielle, contrôlez votre électrocardiogramme et synchronisez les informations automatiquement en un seul clic par Bluetooth grâce à l'application gratuite ViHealth.
- ▶ **Facile à lire et à gérer.** Les informations s'affichent instantanément sur l'écran OLED et vous donne les résultats avant même d'avoir ouvert l'application. L'application vous permet de stocker les informations de manière illimitée et de gérer plusieurs utilisateurs en même temps.
- ▶ **Un appareil plus fiable.** Afin d'éviter des erreurs de résultats, le tensiomètre détecte les faux mouvements et le mauvais positionnement du brassard. Il possède également une fonction de triple mesures automatique.
- ▶ **Très facile à transporter.** Conception monobloc, sans tube et sans fil, facile à emmener avec vous en voyage.

Grâce à l'application ViHealth, bénéficiez des fonctions suivantes :

1. Visualisation en temps réel du processus de mesure de la pression artérielle et du processus d'enregistrement de l'électrocardiogramme.
2. Gestion facile multi-utilisateurs (stockage des données, accès, partage des enregistrements et rapports d'analyse illimités).
3. Gestion de l'évolution de la pression artérielle.
4. Évaluation de l'hypertension par l'AHA.
5. Sauvegarde des données sur le cloud.



► Specifications

PHYSICAL DETAIL

Size (main unit)	135mm(L)×45mm(W)×20mm(H)
Weight (main unit)	240g
Cuff size	Adult cuff: 22-42cm
Small adult cuff (optional)	17-22cm
Adult cuff (optional)	22-32cm
Wireless connectivity	Bluetooth 4.0 BLE

BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS

Pressure measurement range	0 – 300mmHg
Pressure measurement accuracy	±3mmHg
Pulse rate range	40 to 200 /min
Pulse rate accuracy	±2 /min
Technology	Oscillometric Method
Clinical accuracy	Meet IEC80601-2-30

POWER SUPPLY


Charge input	USB Type-C, DC 5V
Battery type	Rechargeable lithium-polymer battery
Battery run time	500 measurements
Charge time	2 hours

MONITOR MEMORY

Blood pressure records	50
ECG	10

VIHEALTH APP COMPATIBLE WITH

iOS	9.0 and later
Android	7 and later

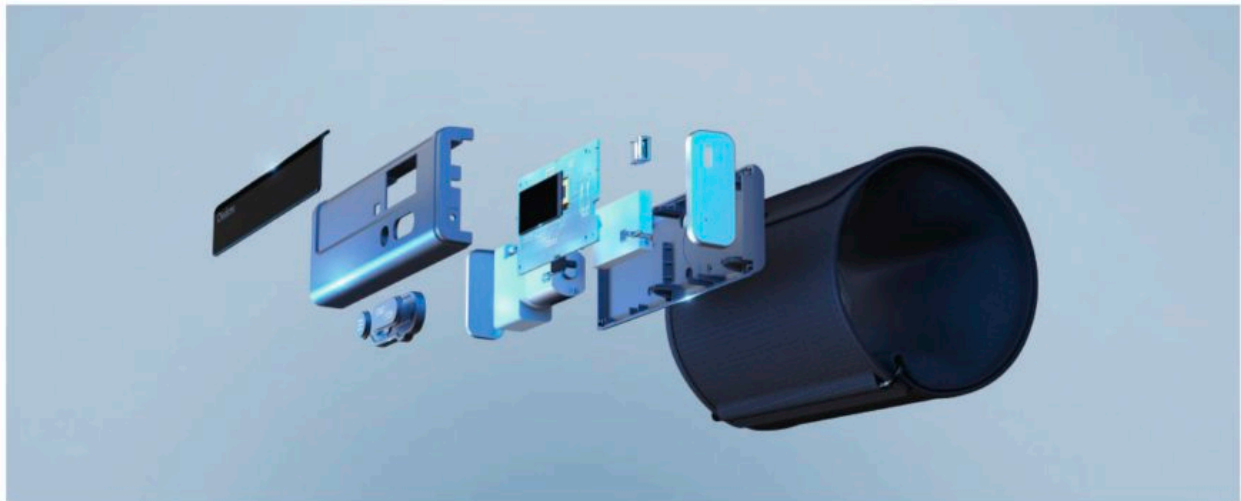

©2022 Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd. All rights reserved. Viatom and Checkme are trademarks of Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd., a subsidiary of Lepu Medical, in China and other countries and regions.

Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

We reserve the right to change specifications and/or discontinue any product at any time without notice or liability and shall not be responsible for any consequences arising out of the use of this publication.



Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.

Tel: +86-755 8672 1161

E-mail: marketing@viatomtech.com

Web: www.viatomtech.com

Add: 4E Building 3, Tingwei Industrial Park, Bao'an, Shenzhen, Guangdong 518100, P.R.China