



Uno sfigmomanometro automatico intelligente per la parte superiore del braccio progettato per l'uso quotidiano



Pressione sanguigna (BP)



Facile da usare



Connessione Bluetooth

APP

App

- ▶ **Clinicamente verificato.** Sviluppato in collaborazione con un gruppo di medici professionisti, in combinazione con una tecnologia di compressione intelligente e polsini elastici in cotone e Lycra di nuova concezione, offre un'esperienza di misurazione accurata e confortevole
- ▶ **Facile da usare.** Con un solo clic è possibile misurare la pressione sanguigna e sincronizzarlo automaticamente tramite Bluetooth con l'App ViHealth gratuita.
- ▶ **Facile da leggere e da gestire.** Lo schermo OLED può fornire un feedback immediato e visualizzare gli esiti anche prima di aprire l'app, inoltre l'applicazione può supportare archiviazione illimitata e gestione multiutente
- ▶ **Di più per l'affidabilità.** Per evitare esiti non validi, lo sfigmomanometro supporta le funzioni di rilevamento di movimento non corretto e controllo dell'usura del bracciale.
- ▶ **Estremamente portatile.** Design compatto, senza tubi e fili, facile da trasportare e comodo in viaggio.

Vantaggi dell'App ViHealth:

1. Possibilità di visualizzare il processo di misurazione della pressione sanguigna in tempo reale.
2. Facile gestione multiutente (archiviazione dei dati, accesso, condivisione di record e report di analisi illimitati)
3. Gestione dell'andamento della pressione arteriosa
4. Valutazione dell'ipertensione AHA
5. Backup dei dati su cloud



► Specifications

PHYSICAL DETAIL

Size (main unit)	135mm(L)×45mm(W)×20mm(H)
Weight (main unit)	240g
Cuff size	Adult cuff: 22-42cm
Small adult cuff (optional)	17-22cm
Adult cuff (optional)	22-32cm
Wireless connectivity	Bluetooth 4.0 BLE

BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS

Pressure measurement range	0 – 300mmHg
Pressure measurement accuracy	±3mmHg
Pulse rate range	40 to 200 /min
Pulse rate accuracy	±2 /min
Technology	Oscillometric Method
Clinical accuracy	Meet IEC80601-2-30

POWER SUPPLY


Charge input	USB Type-C, DC 5V
Battery type	Rechargeable lithium-polymer battery
Battery run time	500 measurements
Charge time	2 hours

MONITOR MEMORY

Blood pressure records	50
ECG	10

VIHEALTH APP COMPATIBLE WITH

iOS	9.0 and later
Android	7 and later

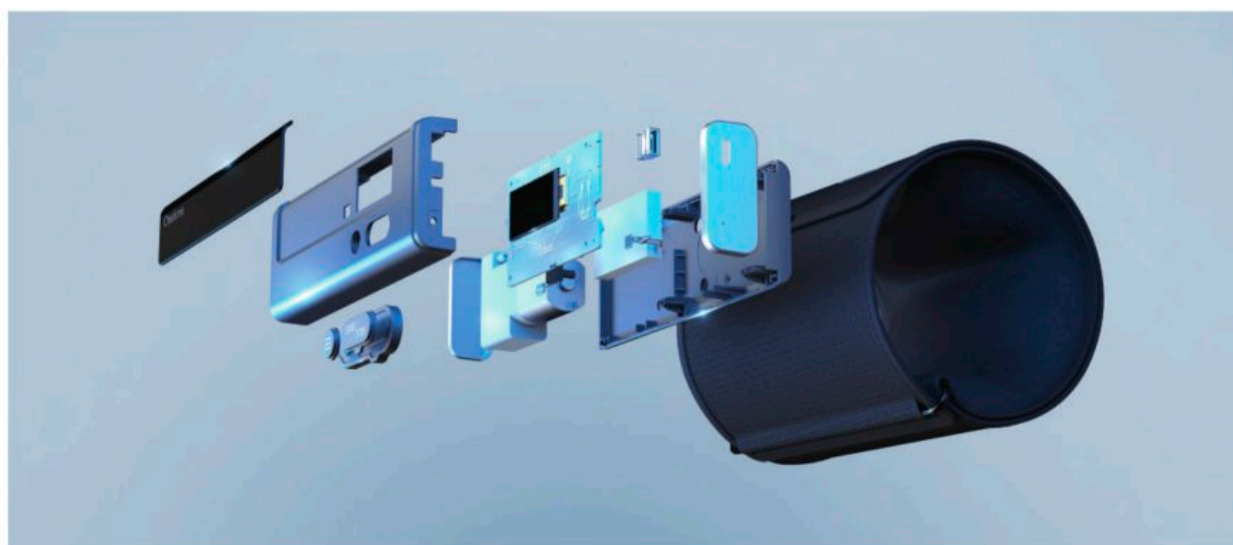

©2022 Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd. All rights reserved. Viatom and Checkme are trademarks of Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd., a subsidiary of Lepu Medical, in China and other countries and regions.

Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

We reserve the right to change specifications and/or discontinue any product at any time without notice or liability and shall not be responsible for any consequences arising out of the use of this publication.



Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.

Tel: +86-755 8672 1161

E-mail: marketing@viatomtech.com

Web: www.viatomtech.com

Add: 4E Building 3, Tingwei Industrial Park,

Bao'an, Shenzhen, Guangdong 518100, P.R.China